

KO 2027 REA VIZIT

Сеул | Южная Корея



Internal Bone Level - Tapered IB^T System



Переходная платформа

Значительно способствует сохранению маргинальной кости и прикреплению мягких тканей. Снижает риск воспалительной клеточной инфильтрации

Гибридная форма

Передает нагрузку на верхушку имплантата. Обеспечивает отличную первичную стабильность, особенно в мягких костях.

Трехгранная самонарезающая кромка

Обеспечивает плавное, atraumatic введение имплантата. Куполообразная верхушка имплантата снижает риск перфорации и точечной компрессии.

Коническое соединение с антитротационным внутренним шестигранником

Внутреннее 11° коническое соединение имплантат/абатмент — надежное, самозатягивающееся, герметичное соединение, равномерное распределение нагрузки и минимизация микро-подвижности


Гибридная двойная резьба

Позволяет прочнее и быстрее устанавливать имплантат в различные типы кости. Уменьшает стресс подлежащей кости во время введения и остеоинтеграции

Обработка поверхности S.L.A.

Пескоструйная обработка и кислотное травление, наиболее исследованные и проверенные технологии обработки поверхности

G-DIFF System IB^T Характеристики

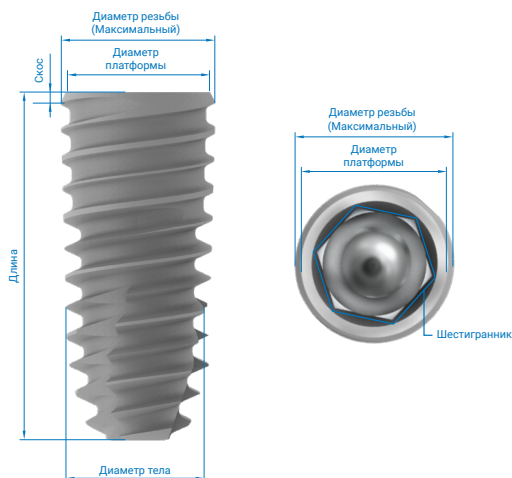

Имплантат	Ø3.5	Ø4.0	Ø4.5	Ø5.0	Ø5.5	Ø6.0	Ø7.0
Соединения	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
Диаметр тела	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
Диаметр резьбы (Максимальный)	3.9	4.2	4.6	5.1	5.5	6.0	7.0
Диаметр платформы	3.7	3.9	4.3	4.8	5.2	5.5	6.5
Длина скоса	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6
Длина имплантата	7.0 / 8.0 / 9.5 / 11.0 / 12.5 / 14.5						

** длина 14,5 мм недоступна для диаметров 6,0 мм и 7,0 мм

Инструментарий Стандартный хирургический набор

